


Aktive multiartikulierende Partialhand



VINCENTpartial active

made in germany

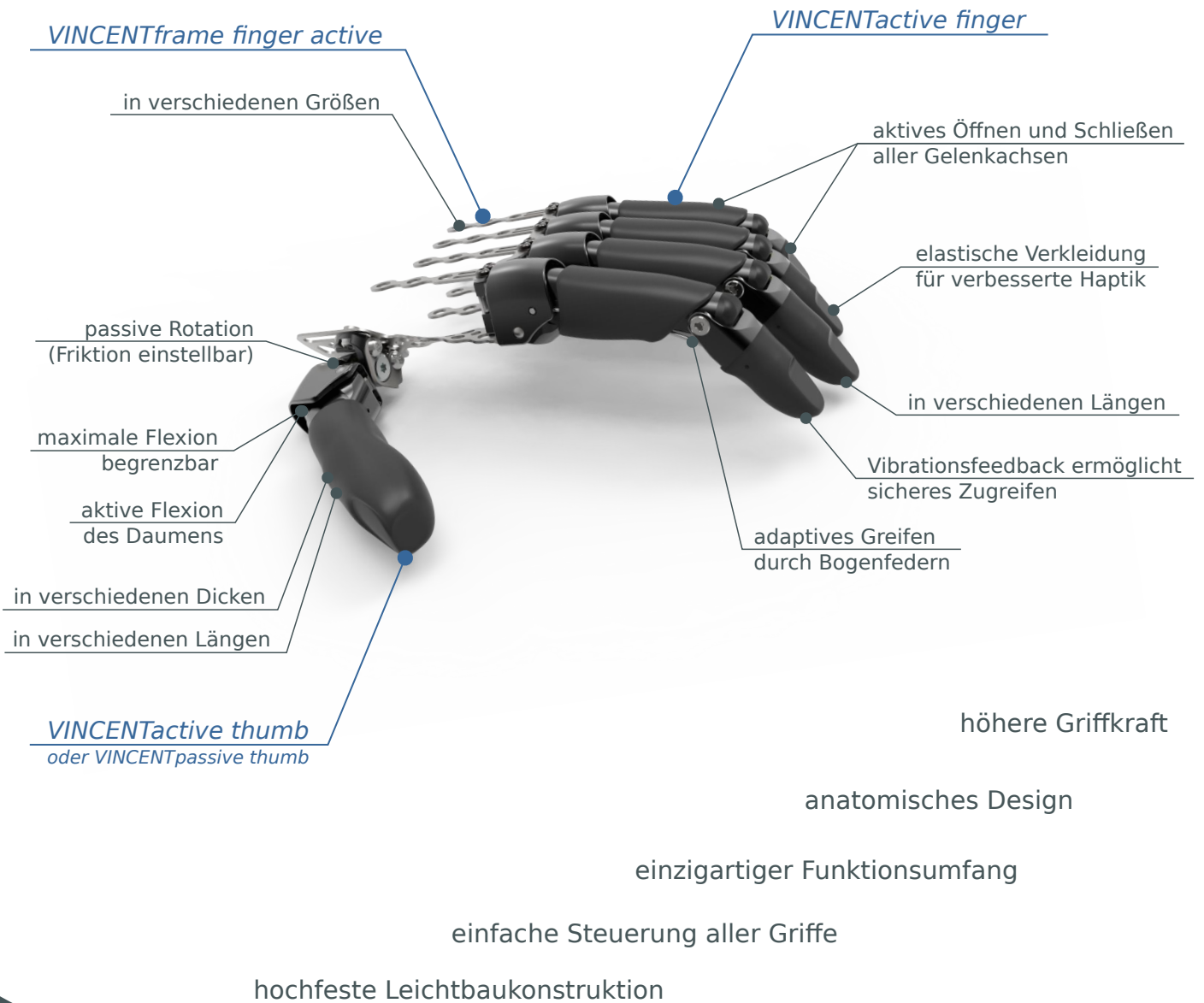

VINCENTpartial active

Der Baukasten für alle aktiven Teilhandprothesen



mehr Griff- und Tragkraft

durch ein neues Getriebekonzept wird sowohl die Griff- als auch die Tragkraft der Hand deutlich erhöht

hochwertige Materialien

durch die Kombination von rostfreiem Edelstahl und hochfester Magnesium-Aluminium-Legierung ist die Handprothese äußerst robust

einfache Steuerung

jeder Finger und Daumen wird unabhängig voneinander durch einen Motor angetrieben, zum Auswählen der verschiedenen Griffe wird mit dem STC-Konzept (*single trigger control*) nur ein einziges Umschaltersignal benötigt

sicheres Zugreifen

die elastische Verkleidung, nachgiebige Bogenfedern und der künstliche Tastsinn ermöglichen jederzeit ein rutschfreies Zugreifen, mit dem neuen Hakengriff kann z.B. Besteck einfach und fest gehalten werden



Eine prothetische Teilhandversorgung ist eine große Herausforderung!

Mit unseren verschiedenen langen aktiven Fingern, den Rahmenelementen in fünf Standardbreiten und den aktiven Daumen des VINCENTpartial-Systems kann jede Partialhand optimal versorgt werden*. Für die Versorgung wird folgendes Zubehör benötigt:

- Energieversorgungssystem VINCENTpower
- Steuerungseinheit VINCENTcontrol
- Sensoren (kompatible EMG-Sensoren oder FSR-Kraftsensoren VINCENTtouch)

Wenn der künstliche Tastsinn genutzt werden soll, muss außerdem die Feedback-Einheit VINCENTvibro im Schaft verbaut werden.


Die Abbildungen der aktiven Finger und aktiven Daumen entsprechen den Originalgrößen.

* Alternativ kann auch der passive Daumen zusammen mit den aktiven Fingern verbaut werden.


VINCENTactive thumb



VINCENTactive finger

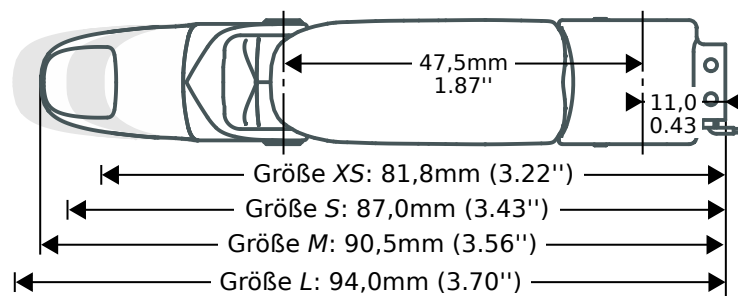

VINCENTframe finger active

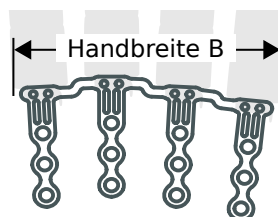

Größe	B [mm]	B [in]
XS	74,7	2.94
S**	77,7	3.06
M	80,8	3.18
L**	83,8	3.30
XL	86,8	3.42

** bald erhältlich

Kundenservice (Mo bis Fr 9-16 Uhr)
Zentrale, Verkauf, Kurse: +49 7244 608351
Technischer Support: +49 721 16178462

www.vincentsystems.de

Vincent Systems GmbH | Breite Straße 155 | 76135 Karlsruhe | Deutschland

Copyright Vincent Systems GmbH G3P02D02DE01